

	<b>MONTAGEM DA CARGA PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A VAPOR</b>	<b>POP CME Nº: 005</b>
	<b>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO</b>	<b>Edição: 24/05/2017 Versão: 001 Data Versão: 10.01.2013 Página 1 de 5</b>

## 1- OBJETIVO

Montar a carga da autoclave à vapor de forma que penetre o agente esterilizante.

## 2- ABRANGÊNCIA

Centro de Material e Esterilização do HU.

## 3- RESPONSÁVEL PELA ATIVIDADE

Técnico de enfermagem escalado para área de lavagem.

## 4-MATERIAL:

- Luva protetora térmica;
- Rack da autoclave;
- Formulário de registro da carga;
- Testes;
- Pacotes prontos para serem esterilizados.

## 5- DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES/AÇÃO

1. Os materiais de conformação côncavo-convexa serão dispostos nos cestos em posição vertical ou inclinados;
2. Os materiais tipo jarros, baldes e frascos serão dispostos com a boca para baixo, os potes maiores deverão ocupar a posição inferior;
3. Não apertar muito os pacotes para permitir a passagem do vapor;
4. Materiais avulsos embalados em papel grau cirúrgico acondicionar em cesto próprio em posição vertical para facilitar a entrada e circulação do vapor, bem como a eliminação do ar. Essa disposição correta evita a ineficiência da secagem da carga;
5. Utilizar até 80% da capacidade da câmara do equipamento;
6. Utilizar luva com proteção térmica para manipular o rack após o processo de esterilização;
7. Etiquetar todos os pacotes com a etiqueta química com dados conforme a rotina, autoclave, lote, data de esterilização, validade;
8. Espaçar os pacotes com aproximadamente 1cm entre eles;

### UNIDADE COTIA – SP - SEDE

Rua Professor Manoel José Pedrosa ,41 - conj. 01,02 e 04 - Cotia/SP - CEP 06717-100  
Fones: (11) 4614.2103 (11) 4614.2159 (11) 4148.3457 (11) 3421.2201

### UNIDADE SÃO PAULO – SP - SUPERINTENDÊNCIA

Rua George Ohm, 206 - Torre B - 10º. andar - conj. 101/102.B - Região Berrini - São Paulo/SP  
Fone: (11) 2450.7440

### UNIDADE BRASÍLIA – DF

SHS Quadra 01, Bloco A – Loja 30 e 31 – Galeria do Hotel Nacional – Brasília/DF –  
CEP 70.322-900 Fones: (61) 3225-0967 (61) 3226-2339

### UNIDADE RECIFE – PE

Avenida República do Líbano, 251 - Torre C - conj. 2801 - Recife/PE - CEP 51110-160  
Fone: (81) 3128.5497

### UNIDADE MANAUS – AM

Avenida Rio Jutai -670 - conj. Vieira Alves - Bairro N. S. das Graças - Manaus/AM  
CEP 69053-020 Fone: (92) 3133.3145


### UNIDADE FLORIANÓPOLIS – SC

Avenida Rio Branco, 404 - Torre 2 - conj. 1203 - Florianópolis/SC - CEP 88015-200  
Fone: (48) 3031.8653

	<b>MONTAGEM DA CARGA PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A VAPOR</b>	<b>POP CME Nº: 005</b>
	<b>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO</b>	Edição: 24/05/2017 Versão: 001 Data Versão: 10.01.2013 Página 2 de 5

9. Posicionar os pacotes para estarem paralelos ao fluxo de vapor;
  10. Não posicionar os pacotes encostados na parede interna da câmara;
- Não sobrepor materiais de modo a compactá-los.

#### A) Carga Mista

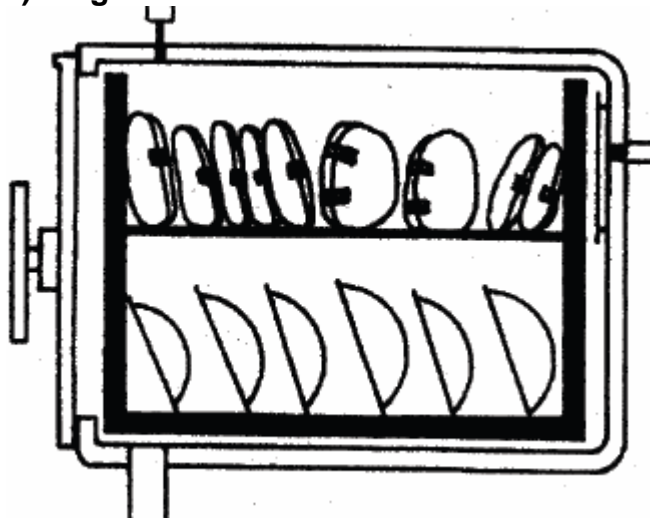

Em cargas mistas, materiais de superfície devem ser colocados nas prateleiras abaixo dos materiais absorventes, para evitar condensação e possível excesso de umidade nas embalagens absorventes.

#### UNIDADE COTIA – SP - SEDE

Rua Professor Manoel José Pedrosa ,41 - conj. 01,02 e 04 - Cotia/SP - CEP 06717-100  
Fones: (11) 4614.2103 (11) 4614.2159 (11) 4148.3457 (11) 3421.2201

#### UNIDADE SÃO PAULO – SP - SUPERINTENDÊNCIA

Rua George Ohm, 206 - Torre B - 10º. andar - conj. 101/102.B - Região Berrini - São Paulo/SP  
Fone: (11) 2450.7440

#### UNIDADE BRASÍLIA – DF

SHS Quadra 01, Bloco A – Loja 30 e 31 – Galeria do Hotel Nacional – Brasília/DF –  
CEP 70.322-900 Fones: (61) 3225-0967 (61) 3226-2339

#### UNIDADE RECIFE – PE

Avenida República do Líbano, 251 - Torre C - conj. 2801 - Recife/PE - CEP 51110-160  
Fone: (81) 3128.5497

#### UNIDADE MANAUS – AM


Avenida Rio Jutai -670 - conj. Vieira Alves - Bairro N. S. das Graças - Manaus/AM  
CEP 69053-020 Fone: (92) 3133.3145

#### UNIDADE FLORIANÓPOLIS – SC

Avenida Rio Branco, 404 - Torre 2 - conj. 1203 - Florianópolis/SC - CEP 88015-200  
Fone: (48) 3031.8653

	<b>MONTAGEM DA CARGA PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A VAPOR</b>	<b>POP CME Nº: 005</b>
	<b>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO</b>	Edição: 24/05/2017 Versão: 001 Data Versão: 10.01.2013 Página 3 de 5

### B) Cargas com Tecidos

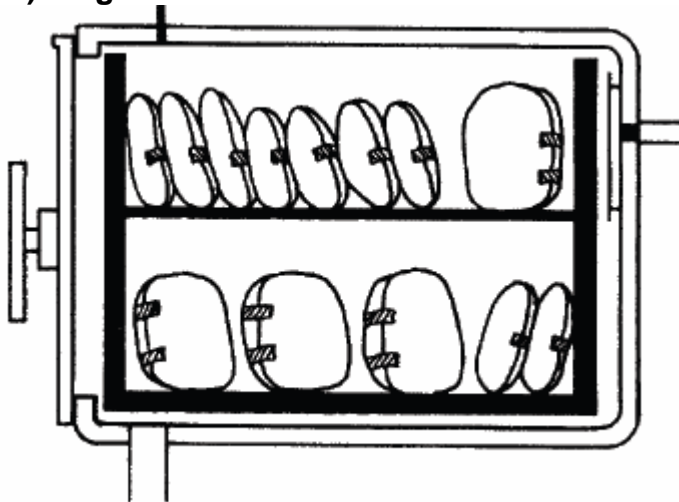

Pacotes com tecidos devem ser posicionados perpendiculares às prateleiras da autoclave.

### C) Cargas com Caixas Perfuradas ou Contêineres

Caixas perfuradas embaladas devem ser posicionadas com sua base paralelamente às prateleiras da autoclave.

#### UNIDADE COTIA – SP - SEDE

Rua Professor Manoel José Pedrosa ,41 - conj. 01,02 e 04 - Cotia/SP - CEP 06717-100  
Fones: (11) 4614.2103 (11) 4614.2159 (11) 4148.3457 (11) 3421.2201

#### UNIDADE SÃO PAULO – SP - SUPERINTENDÊNCIA

Rua George Ohm, 206 - Torre B - 10º. andar - conj. 101/102.B - Região Berrini - São Paulo/SP  
Fone: (11) 2450.7440

#### UNIDADE BRASÍLIA – DF

SHS Quadra 01, Bloco A – Loja 30 e 31 – Galeria do Hotel Nacional – Brasília/DF –  
CEP 70.322-900 Fones: (61) 3225-0967 (61) 3226-2339

#### UNIDADE RECIFE – PE

Avenida República do Líbano, 251 - Torre C - conj. 2801 - Recife/PE - CEP 51110-160  
Fone: (81) 3128.5497

#### UNIDADE MANAUS – AM

Avenida Rio Jutai -670 - conj. Vieira Alves - Bairro N. S. das Graças - Manaus/AM  
CEP 69053-020 Fone: (92) 3133.3145

#### UNIDADE FLORIANÓPOLIS – SC

Avenida Rio Branco, 404 - Torre 2 - conj. 1203 - Florianópolis/SC - CEP 88015-200  
Fone: (48) 3031.8653

	<b>MONTAGEM DA CARGA PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A VAPOR</b>	<b>POP CME Nº: 005</b>
	<b>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO</b>	<b>Edição: 24/05/2017 Versão: 001 Data Versão: 10.01.2013 Página 4 de 5</b>

#### D) Carga com Grau Cirúrgico



Embalagens de papel grau cirúrgico devem ser posicionadas verticalmente, sendo os lados plástico com plástico e papel com papel. Rack's ou cestos podem ser utilizadas para melhor acondicionamento;

#### 6- INDICAÇÕES E CONTRAINDICAÇÕES

A esterilização está fundamentada na troca de calor entre o meio e o objeto a ser esterilizado, indicada para materiais termorresistentes;

#### 7- ORIENTAÇÃO PACIENTE / FAMILIAR ANTES E APÓS O PROCEDIMENTO

Não se aplica;

#### 8- REGISTROS

No livro de relatório das autoclaves onde é registrada a entrada e a quantidade de cada material, número da autoclave, lote, ciclo, parâmetros, data, horário de início e término do ciclo; Na folha de registro que acompanha o material no item esterilização do carimbo é registrado o funcionário que executou a ação com respectiva data e horário.

#### 9- PONTOS CRÍTICOS / RISCOS

Falhas na montagem da carga;

##### UNIDADE COTIA – SP - SEDE

Rua Professor Manoel José Pedroso, 41 - conj. 01,02 e 04 - Cotia/SP - CEP 06717-100  
Fones: (11) 4614.2103 (11) 4614.2159 (11) 4148.3457 (11) 3421.2201

##### UNIDADE SÃO PAULO – SP - SUPERINTENDÊNCIA

Rua George Ohm, 206 - Torre B - 10º. andar - conj. 101/102.B - Região Berrini - São Paulo/SP  
Fone: (11) 2450.7440

##### UNIDADE BRASÍLIA – DF

SHS Quadra 01, Bloco A – Loja 30 e 31 – Galeria do Hotel Nacional – Brasília/DF –  
CEP 70.322-900 Fones: (61) 3225-0967 (61) 3226-2339

##### UNIDADE RECIFE – PE


Avenida República do Líbano, 251 - Torre C - conj. 2801 - Recife/PE - CEP 51110-160  
Fone: (81) 3128.5497

##### UNIDADE MANAUS – AM

Avenida Rio Jutai -670 - conj. Vieira Alves - Bairro N. S. das Graças - Manaus/AM  
CEP 69053-020 Fone: (92) 3133.3145

##### UNIDADE FLORIANÓPOLIS – SC

Avenida Rio Branco, 404 - Torre 2 - conj. 1203 - Florianópolis/SC - CEP 88015-200  
Fone: (48) 3031.8653

	<b>MONTAGEM DA CARGA PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A VAPOR</b>	<b>POP CME Nº: 005</b>
	<b>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO</b>	Edição: 24/05/2017 Versão: 001 Data Versão: 10.01.2013 Página 5 de 5

## 10 - AÇÕES DE CONTRA MEDIDA

10.1) Treinamento específico para a atividade;

## 11- REFERÊNCIAS

11.1- SOBECC, Práticas Recomendadas – SOBECC – 6ª Ed. – São Paulo – SP – 2013.

11.2- GRAZIANO, Kazuko U.; SILVA, Arlete; PSALTIKIDIS, Eliane M. - Enfermagem em Centro de Material e Esterilização: Recepção e limpeza dos Materiais, ed. Manole, 1ºed- 2011; pg: 63-91.

## 12- ATUALIZAÇÃO DA VERSÃO

REVISÃO	DATA	ELABORADO/ REVISADO POR	DESCRIÇÃO DAS ALTERAÇÕES
002	21/06/2017	Aline Teixeira e Rosana Gonçalves.	Revisão do Processo

DATA DE EMISSÃO	DISPONIBILIZADO POR	APROVADO POR
27/07/2017	Daniela Garcez HU Gestão de Documentos	Rosana Gonçalves – Coordenadora do Centro de Materiais e Esterilização

### UNIDADE COTIA – SP - SEDE

Rua Professor Manoel José Pedrosa, 41 - conj. 01,02 e 04 - Cotia/SP - CEP 06717-100  
Fones: (11) 4614.2103 (11) 4614.2159 (11) 4148.3457 (11) 3421.2201

### UNIDADE SÃO PAULO – SP - SUPERINTENDÊNCIA

Rua George Ohm, 206 - Torre B - 10º. andar - conj. 101/102.B - Região Berrini - São Paulo/SP  
Fone: (11) 2450.7440

### UNIDADE BRASÍLIA – DF

SHS Quadra 01, Bloco A – Loja 30 e 31 – Galeria do Hotel Nacional – Brasília/DF –  
CEP 70.322-900 Fones: (61) 3225-0967 (61) 3226-2339

### UNIDADE RECIFE – PE

Avenida República do Líbano, 251 - Torre C - conj. 2801 - Recife/PE - CEP 51110-160  
Fone: (81) 3128.5497

### UNIDADE MANAUS – AM

Avenida Rio Jutai -670 - conj. Vieira Alves - Bairro N. S. das Graças - Manaus/AM  
CEP 69053-020 Fone: (92) 3133.3145

### UNIDADE FLORIANÓPOLIS – SC

Avenida Rio Branco, 404 - Torre 2 - conj. 1203 - Florianópolis/SC - CEP 88015-200  
Fone: (48) 3031.8653