

	CONTROLE DE REVISÃO DA ÁREA DE ARMAZENAMENTO DO CENTRO CIRÚRGICO	POP CME Nº: 001
	Procedimento Operacional Padrão - CME	Edição: 24/05/2017 Versão: 001 Data Versão: 10.01.2013 Página 1 de 4

1. OBJETIVO

Monitorar superfície de materiais críticos por amostragem, diariamente, uma vez por turno e um teste piloto por dia

2. ABRANGÊNCIA

Área de limpeza e preparo do CME.

3- RESPONSÁVEL PELA ATIVIDADE

Enfermeira do CME.

4- MATERIAL:

- 1 swab do Clean Trace ATP Surface® (tampa azul) armazenado em temperatura entre 2 à 8°C
- Luminômetro

5- DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES/AÇÃO:

Processo para monitorar o material limpo e o material sujo (teste piloto)

- Antes de o dispositivo Clean Trace ser ativado, é importante garantir que o Luminômetro 3M esteja ligado e inicializado.
- Deixar os testes Clean-Trace em temperatura ambiente por, pelo menos, 10 minutos antes do uso;
- Escolher preferencialmente um material crítico e de maior nível de contaminação;
- Segure o swab pela extremidade azul e remova-o do tubo;
- Aplique o swab na área de teste escolhido, esta área deve ser a área considerada mais difícil para sua limpeza, por exemplo: serrilhas, articulações ou superfícies corrugadas, caso for uma superfície grande aplicar o swab em uma área de aproximadamente 10 cm por 10 cm em uma direção e, em seguida, na direção oposta. Aplique pressão no swab e gire-o à medida que a amostra for coletada, a fim de garantir uma amostra repetível e eficaz;

UNIDADE COTIA – SP - SEDE

Rua Professor Manoel José Pedroso, 41 - conj. 01,02 e 04 - Cotia/SP - CEP 06717-100
Fones: (11) 4614.2103 (11) 4614.2159 (11) 4148.3457 (11) 3421.2201

UNIDADE SÃO PAULO – SP - SUPERINTENDÊNCIA

Rua George Ohm, 206 - Torre B - 10º. andar - conj. 101/102.B - Região Berrini - São Paulo/SP
Fone: (11) 2450.7440

UNIDADE BRASÍLIA – DF

SHS Quadra 01, Bloco A – Loja 30 e 31 – Galeria do Hotel Nacional – Brasília/DF – CEP 70.322-900 Fones: (61) 3225-0967 (61) 3226-2339

UNIDADE RECIFE – PE


Avenida República do Líbano, 251 - Torre C - conj. 2801 - Recife/PE - CEP 51110-160
Fone: (81) 3128.5497


UNIDADE MANAUS – AM

Avenida Rio Jutai - 670 - conj. Vieira Alves - Bairro N. S. das Graças - Manaus/AM
CEP 69053-020 Fone: (92) 3133.3145


UNIDADE FLORIANÓPOLIS – SC

Avenida Rio Branco, 404 - Torre 2 - conj. 1203 - Florianópolis/SC - CEP 88015-200
Fone: (48) 3031.8653


	CONTROLE DE REVISÃO DA ÁREA DE ARMAZENAMENTO DO CENTRO CIRÚRGICO	POP CME Nº: 001
	Procedimento Operacional Padrão - CME	Edição: 24/05/2017 Versão: 001 Data Versão: 10.01.2013 Página 2 de 4

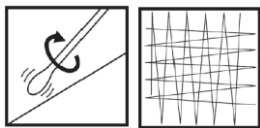

- Reinsira o swab no tubo, na posição original do dispositivo não utilizado. Neste momento, você pode ativar e medir imediatamente ou, se for mais conveniente, os testes Clean Trace podem ser etiquetados, armazenados no saco e deixados não ativados por até quatro horas antes da ativação e medição;
- Empurre firmemente a parte superior do swab, que irá deslizar para o tubo do dispositivo e a parte superior do swab ficará nivelada com a parte superior do tubo do dispositivo quando for totalmente pressionada;
- Segure a parte superior do dispositivo e agite-a suavemente de lado a lado por, pelo menos, cinco segundos para misturar a amostra e o reagente;

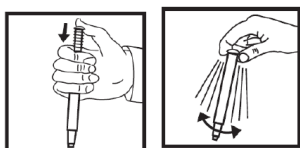

- Abra imediatamente a câmara da amostra do Luminômetro Clean Trace e insira o teste. Feche a tampa da câmara e pressione o botão de medição;

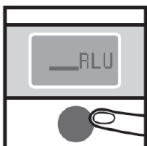

- A luz emitida pelo teste CleanTrace será medida e o resultado (em RLU) será exibido no visor;

Interpretação dos resultados

- Material sujo (teste piloto) é esperado que se tenha um resultado com níveis de RLU altíssimos (após coletas de amostragem deve ser estabelecido um parâmetro para este material sujo;

UNIDADE COTIA – SP - SEDE

Rua Professor Manoel José Pedrosa, 41 - conj. 01,02 e 04 - Cotia/SP - CEP 06717-100
Fones: (11) 4614.2103 (11) 4614.2159 (11) 4148.3457 (11) 3421.2201

UNIDADE SÃO PAULO – SP - SUPERINTENDÊNCIA

Rua George Ohm, 206 - Torre B - 10º. andar - conj. 101/102.B - Região Berrini - São Paulo/SP
Fone: (11) 2450.7440

UNIDADE BRASÍLIA – DF

SHS Quadra 01, Bloco A – Loja 30 e 31 – Galeria do Hotel Nacional – Brasília/DF –
CEP 70.322-900 Fones: (61) 3225-0967 (61) 3226-2339

UNIDADE RECIFE – PE

Avenida República do Líbano, 251 - Torre C - conj. 2801 - Recife/PE - CEP 51110-160
Fone: (81) 3128.5497

UNIDADE MANAUS – AM

Avenida Rio Jutai - 670 - conj. Vieira Alves - Bairro N. S. das Graças - Manaus/AM
CEP 69053-020 Fone: (92) 3133.3145

UNIDADE FLORIANÓPOLIS – SC

Avenida Rio Branco, 404 - Torre 2 - conj. 1203 - Florianópolis/SC - CEP 88015-200
Fone: (48) 3031.8653

	CONTROLE DE REVISÃO DA ÁREA DE ARMAZENAMENTO DO CENTRO CIRÚRGICO	POP CME Nº: 001
	Procedimento Operacional Padrão - CME	Edição: 24/05/2017 Versão: 001 Data Versão: 10.01.2013 Página 3 de 4

- Material limpo o resultado, comparado ao material sujo, será baixíssimo (o parâmetro para material limpo também deverá ser definido após algumas coletas de amostragem);

Conduta de acordo com o resultado

- Para o resultado do teste piloto, deve ser registrado o seu resultado junto aos resultados dos testes realizados neste dia;
- Quando o material obter um resultado acima do esperado para estar limpo, deverá retornar para o processo de limpeza novamente todo o material que fazia parte daquela amostragem e não somente o material que foi reprovado e repetir o teste. Registrar todos os resultados (antes e após conduta). Registrar a conduta tomada;
- Quando o material atingir o nível esperado para limpo, somente registrar o resultado;

6- INDICAÇÕES/CONTRA-INDICAÇÕES:

Não se aplica.

7- ORIENTAÇÃO PACIENTE / FAMILIAR ANTES E APÓS O PROCEDIMENTO:

Não se aplica.

8- REGISTROS:

Registro de passagem de plantão.

9- PONTOS CRÍTICOS/RISCOS:

- Encaminhar material ao preparo com sujidade;
- Extravio de peças.

UNIDADE COTIA – SP - SEDE

Rua Professor Manoel José Pedrosa, 41 - conj. 01,02 e 04 - Cotia/SP - CEP 06717-100
Fones: (11) 4614.2103 (11) 4614.2159 (11) 4148.3457 (11) 3421.2201

UNIDADE SÃO PAULO – SP - SUPERINTENDÊNCIA

Rua George Ohm, 206 - Torre B - 10º. andar - conj. 101/102.B - Região Berrini - São Paulo/SP
Fone: (11) 2450.7440

UNIDADE BRASÍLIA – DF

SHS Quadra 01, Bloco A – Loja 30 e 31 – Galeria do Hotel Nacional – Brasília/DF –
CEP 70.322-900 Fones: (61) 3225-0967 (61) 3226-2339

UNIDADE RECIFE – PE


Avenida República do Líbano, 251 - Torre C - conj. 2801 - Recife/PE - CEP 51110-160
Fone: (81) 3128.5497

UNIDADE MANAUS – AM

Avenida Rio Jutai -670 - conj. Vieira Alves - Bairro N. S. das Graças - Manaus/AM
CEP 69053-020 Fone: (92) 3133.3145

UNIDADE FLORIANÓPOLIS – SC

Avenida Rio Branco, 404 - Torre 2 - conj. 1203 - Florianópolis/SC - CEP 88015-200
Fone: (48) 3031.8653

	CONTROLE DE REVISÃO DA ÁREA DE ARMAZENAMENTO DO CENTRO CIRÚRGICO	POP CME Nº: 001
	Procedimento Operacional Padrão - CME	Edição: 24/05/2017 Versão: 001 Data Versão: 10.01.2013 Página 4 de 4

10- AÇÕES DE CONTRA-MEDIDA:

Não se aplica.

11- REFERÊNCIAS

- 1.SOBECC, Práticas Recomendadas; 6ª Ed. São Paulo, SP: 2013.
- 2.ANVISA. Informe Técnico n1/2009. Princípios básicos para a limpeza de instrumentais cirúrgicos em serviços de saúde.

REVISÃO	DATA	ELABORADO/ REVISADO POR	DESCRIÇÃO DAS ALTERAÇÕES
002	21/06/2017	Aline Teixeira e Rosana Gonçalves	Revisão do Processo

Data de Emissão	Disponibilizado por	Aprovado por
27/07/2017	Daniela Garcez HU	Domitila Mazuim Supervisora de Enfermagem – Centro Cirúrgico - CME

UNIDADE COTIA – SP - SEDE

Rua Professor Manoel José Pedrosa ,41 - conj. 01,02 e 04 - Cotia/SP - CEP 06717-100
Fones: (11) 4614.2103 (11) 4614.2159 (11) 4148.3457 (11) 3421.2201

UNIDADE SÃO PAULO – SP - SUPERINTENDÊNCIA

Rua George Ohm, 206 - Torre B - 10º. andar - conj. 101/102.B - Região Berrini - São Paulo/SP
Fone: (11) 2450.7440

UNIDADE BRASÍLIA – DF

SHS Quadra 01, Bloco A – Loja 30 e 31 – Galeria do Hotel Nacional – Brasília/DF –
CEP 70.322-900 Fones: (61) 3225-0967 (61) 3226-2339

UNIDADE RECIFE – PE

Avenida República do Líbano, 251 - Torre C - conj. 2801 - Recife/PE - CEP 51110-160
Fone: (81) 3128.5497

UNIDADE MANAUS – AM

Avenida Rio Jutai -670 - conj. Vieira Alves - Bairro N. S. das Graças - Manaus/AM
CEP 69053-020 Fone: (92) 3133.3145

UNIDADE FLORIANÓPOLIS – SC

Avenida Rio Branco, 404 - Torre 2 - conj. 1203 - Florianópolis/SC - CEP 88015-200
Fone: (48) 3031.8653